

Das EZ CARE-Kommunikationsterminal ist die moderne Lösung für die Anforderungen im Gesundheitswesen. Mit vielen Funktionen erleichtert es den täglichen Arbeitsablauf – auch in Ihrer Einrichtung.

### Vielseitig einsetzbar

Das Terminal wird in Patientenzimmern, Schwesternstützpunkten und auf Fluren installiert und dient hauptsächlich der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Patienten.

Mit nur einem Tastendruck werden aktive Rufe abgefragt oder Zimmer bzw. Betten direkt angesprochen. Das erspart überflüssige Wege.

#### Erhöhter Infektionsschutz

Aufgrund der Verwendung ausschließlich antibakterieller Materialien wird wesentlich zur Reduzierung des Infektionsrisikos beigetragen. Die Möglichkeit, die Anwesenheit auch berührungslos mit einer RFID-Karte zu aktivieren, unterstützt den Schutz gegen Infektionen ebenfalls.

#### Multifunktionales Display

Rufe und Notrufe werden auf dem Display in unterschiedlichen Farben dargestellt, um diese auch aus großer Entfernung leichter zu erkennen.

Aufgrund der frei programmierbaren Displaytasten ist die Bedienung des Terminals intuitiv und einfach.

Die Zusatzfunktionen werden mit einem einzigen Tastendruck auf dem Display ausgewählt und erleichtern zusätzlich den Arbeitsalltag Ihres Personals.

#### Sicherheit an erster Stelle

Das KT Touch überwacht alle angeschlossenen Zimmerkomponenten und meldet den Status in die Station. In Anlagen mit LAN-Verbindung trägt unser einzigartiges patentiertes ECS-Notbetriebssystem zur zusätzlichen Sicherheit in unserem System bei.

#### **DIN VDE 0834**

Das KT Touch ist von einer akkreditierten Stelle entsprechend DIN VDE 0834 geprüft und erfüllt diese in vollem Umfang.

# Abläufe neu gedacht ...

Das Multifunktions-Display überzeugt mit einer Vielzahl von Funktionen, die das Pflegepersonal im hektischen Arbeitsalltag entlasten.



#### Farbcodiertes Anzeigedisplay


Durch die einzigartige Farbcodierung werden die Rufarten bereits aus großer Entfernung eindeutig erkannt, z.B. Herzalarm mit blauem Display-Hintergrund.



Bis zu 6 verschiedene, frei programmierbare Tasten können im Touch-Display angezeigt werden. So ist es möglich, mit nur einem Tastendruck die gewünschte Funktion zu wählen.

### Schichtumschaltung

Für die tägliche Routine bietet das KT Touch die einfache Umschaltung zwischen Tag- und Nachtschicht. Der jeweils aktuelle Zustand ist auf einen Blick ersichtlich und kann bei Bedarf sofort geändert werden.

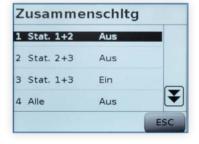

### Durchsage

Eine der am häufigsten genutzten Funktionen ist die Durchsage. Eine Displaytaste kann mit einer oft genutzten Durchsageart (z. B. in die eigene Station) belegt werden, um diese bei Betätigung zu aktivieren.




### Ansprechen eines Zimmers

Mit nur einem einzigen Tastendruck ist es möglich, eine Liste mit allen ansprechbaren Zimmern zu öffnen und ein ausgewähltes Zimmer direkt anzusprechen.



## ... mit nützlichen Zusatzfunktionen ...

Einen großen Mehrwert bietet das KT Touch durch die Bereitstellung weiterer Dienste, um die organisatorischen Abläufe zu unterstützen.

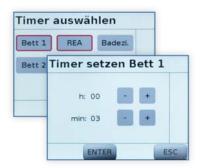

#### Automatische Erinnerungen – Timer

Mit dieser Funktion können automatische Erinnerungen zeitabhängig (Stunden/Minuten) eingestellt werden, um an wichtige wiederkehrende Aufgaben, z.B. Medikation oder therapeutische Behandlung, zu erinnern.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, einzelne Funktionen des KT Touch mit einem Passwort gegen unsachgemäße Handhabung zu schützen.

#### Zimmerstatus

Zur schnellen Übermittlung des aktuellen Zimmerstatus genügt ein Tastendruck. Der jeweilige Status eines Zimmers ist auf einen Blick erkennbar. Optional kann das Reinigungspersonal automatisch benachrichtigt werden.






#### Telefonfunktion

Ist die Rufanlage in die Telefonanlage Ihrer Einrichtung integriert, kann ein KT Touch ein Telefon anrufen oder von einem Telefon angerufen werden. Über das Touch-Display kann eine beliebige Telefonnummer gewählt werden.

#### In Zimmer hören

Speziell in Neugeborenen-Stationen ist diese Funktion sehr beliebt. Das Pflegepersonal kann für eine bestimmte Zeit in vorausgewählte Zimmer hören, ohne diese betreten zu müssen. Halten sich weitere Personen im Zimmer auf, wird dieses Zimmer automatisch übersprungen.

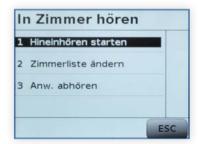



# ... und Integrationen

Die Integration verschiedener Zusatztechnologien eröffnet weitere Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen und das Personal zu entlasten.

### Berührungslose Anwesenheit – Risikominimierung für Infektionen

Das KT Touch hat die RFID-Funktion standardmäßig integriert. Das berührungslose Aktivieren der Anwesenheit erhöht den Schutz gegen Infektionen. Alle Aktivitäten können zur späteren Auswertung protokolliert werden.



RFID-Karte und RFID-Tag



Infrarot-/Funksender

#### Automatische Anwesenheit

Bei Betreten eines Zimmers erkennt das System die Personalgruppe und aktiviert die entsprechende Anwesenheit automatisch. Zusätzlich kann über die integrierte Taste ein Notruf ausgelöst werden.

## Integriertes Echtzeit-Lokalisierungssystem

Die Empfänger des Echtzeit-Lokalisierungssystems (RTLS) können direkt an das KT Touch angeschlossen werden. Durch diese Integration werden die Zusatzkosten für ein separates RTLS-Netzwerk eingespart.





### Personal-Notrufsystem

Personen in kritischen Umgebungen können mit dem Alarmgeber in einer gefährlichen Situation einen Notruf auslösen, um Hilfe herbei zu rufen. Die dazugehörigen Empfänger sind direkt mit dem KT Touch verbunden.



Firmenstempel

Schrack Seconet Care Communication GmbH Eibesbrunnergasse 18 | 1120 Wien | Österreich

EZ.950.0017D | Version 1.0 | 02. Mai 2022

© 2022 Schrack Seconet Care Communication GmbH Alle Rechte vorbehalten.

ez-care.com \_\_\_\_\_\_